


QuPath與CytoMAP 軟體安裝說明

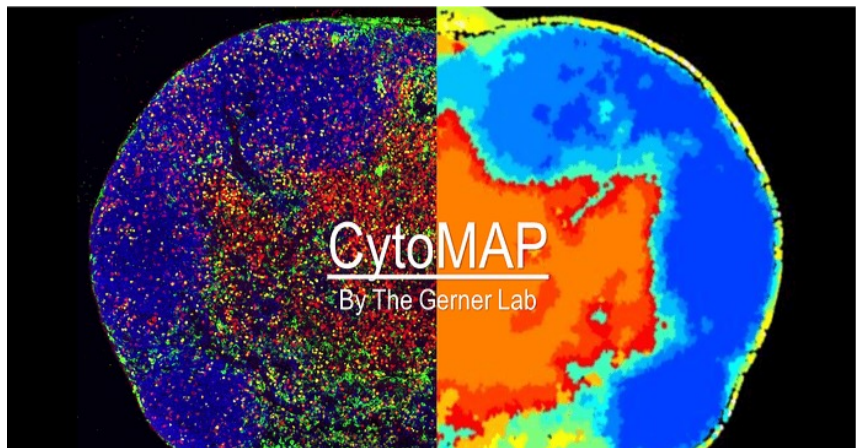

博克科技股份有限公司
J&H TECHNOLOGY CO., LTD.

台北市內湖區新湖二路162號4樓之1
www.jnhtech.com.tw service@jmhotech.com.tw
0800-898-178 Tel: 02-87912769

1. 下載Akoya附的安裝懶人包，點擊QuPath .exe檔案安裝QuPath軟體。
2. 開啟QuPath軟體，將qupath-extension-stardist-.jar直接拖曳到軟體中(不需解壓縮)，安裝stardist。
3. 開啟資料夾“scripts supporting open-source tools for CDOEX image analysis”並複製CytoMap_colors_(2-6).tsv and custom colormaps.tsv 共6個檔案。
4. 到C:\Users\gcarlson\QuPath\v0.3 建立一個全新的資料夾並名為”colormaps”，然後將剛剛複製的6個檔案貼上。
(C:\Users\gcarlson\QuPath\v0.3\colormaps\CytoMap_colors_2.tsv)。
5. 關閉軟體。
6. 確認電腦已連網，執行CytoMAP_Installer_WindowsV1.4.21進行CytoMAP軟體安裝(安裝過程可能會等比較久是正常的)。