




## 高雄醫學大學 資源整合中心 Discovery Studio 安裝方法

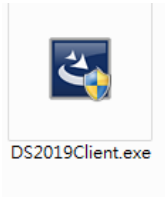

### 【DS Client 安裝】

#### 1. DS2019 Client 安裝檔下載


開啟瀏覽器輸入 <http://163.15.166.73:9944>

The screenshot shows the BIOVIA Server Home Page. The top navigation bar includes the BIOVIA logo, 'Server Home Page', 'Pipeline Pilot', and 'Sign in'. Below the navigation bar, there are several sections: Pipeline Pilot Users, Administrators, Developers, Web Port, and RSS Feeds. On the right side, there are sections for Technical Support and Application Links. The Application Links section contains a list of links: Install BIOVIA Draw, Install Data Source Builder, Install Discovery Studio Client, Install License Pack, and Set Up BIOVIA Desktop Connector. A red arrow points to the 'Install Discovery Studio Client' link.

於右下角點選 Install Discovery Studio Client 連結


This is a close-up view of the Application Links section from the previous screenshot. It shows a list of links: Install BIOVIA Draw, Install Data Source Builder, Install Discovery Studio Client, Install License Pack, and Set Up BIOVIA Desktop Connector. A red arrow points to the 'Install Discovery Studio Client' link.

選擇 Windows 或是 Linux 作業環境的 Client 下載。(\*僅支援 64 位元電腦)

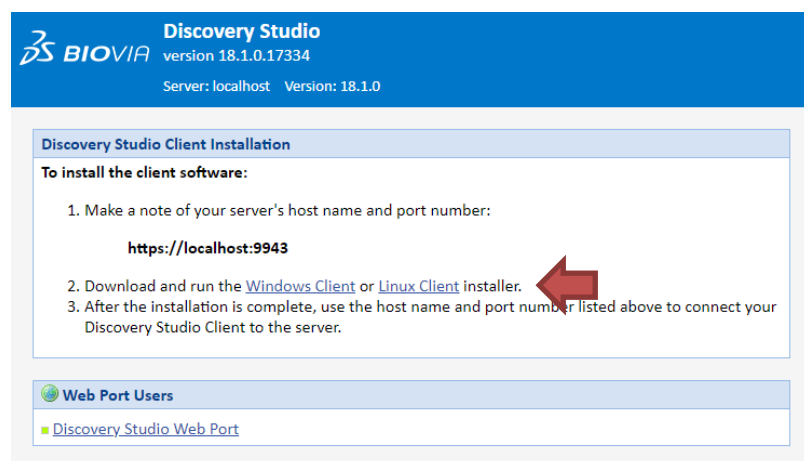



## 2. 安裝路徑設定

執行下載完的 DS2019Client.exe 安裝檔，點選 Next 並設定安裝路徑

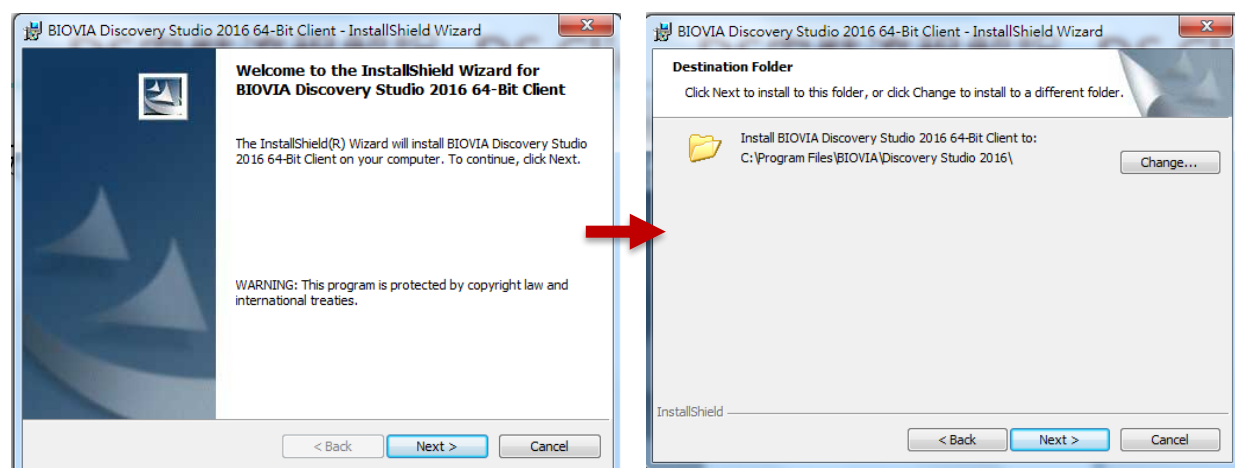


\*安裝路徑勿有中文名稱

### 3. 安裝

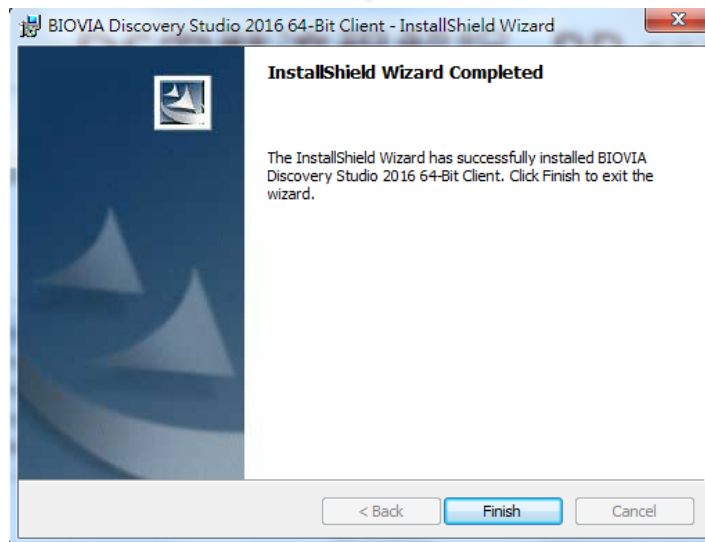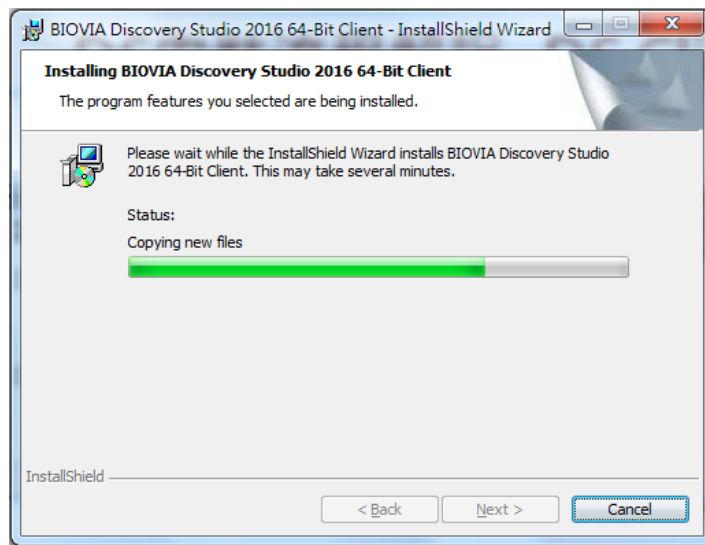


## 安裝 GPL Package 套件

1. 下載 BIOVIA\_2019.BIOVIABiologyGPL2019\_Win64.7z 壓縮檔與 dsaep-2022.lic
2. 解壓縮 GPL Package 並執行  
BIOVIA\_2019.BIOVIABiologyGPL2019\_Win64\BIOVIABiologyGPL2019\_Win64\bin\scitegicsetup.exe
3. 選擇 Add\Remove Products

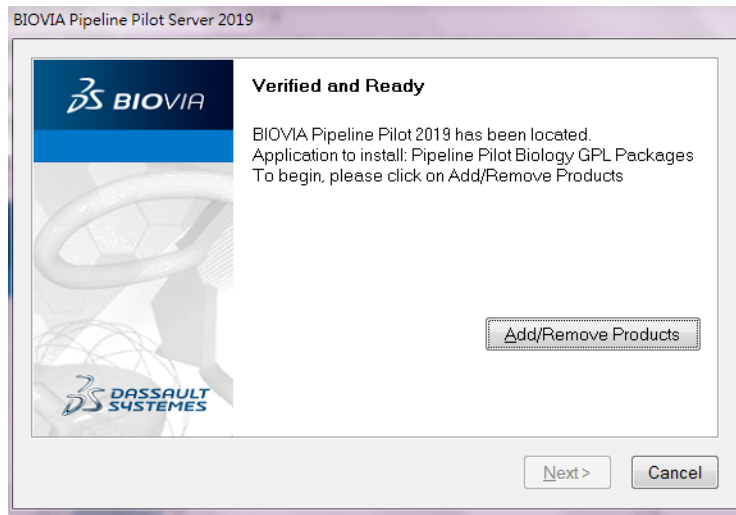


4. 輸入 License File Path，選擇步驟一的 dsaep-2022.lic 位置，點選 Next，之後的步驟以預設參數設定點選 Next，直到安裝完成。

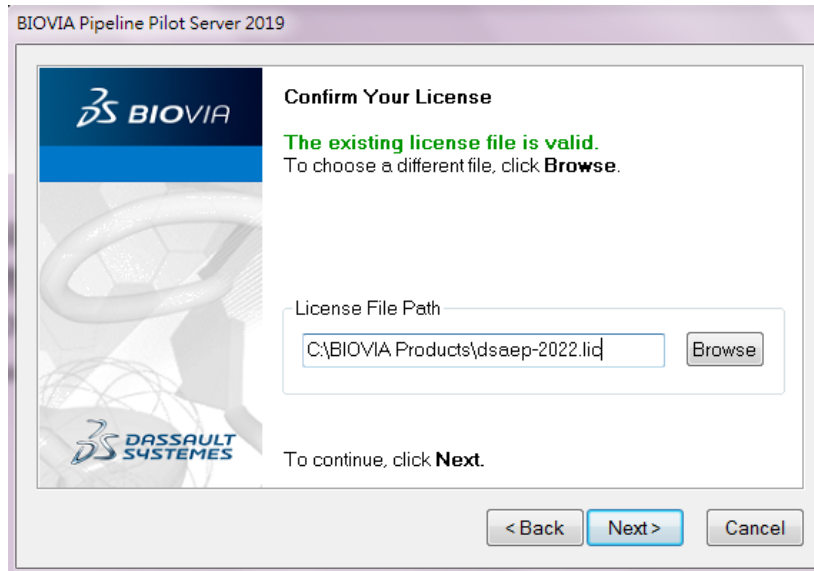


## 加入 DS Server 網域 Domain


1. 至 C:\Windows\System32\drivers\etc 目錄底下，找到 hosts 檔案，按滑鼠右鍵選擇開啟。

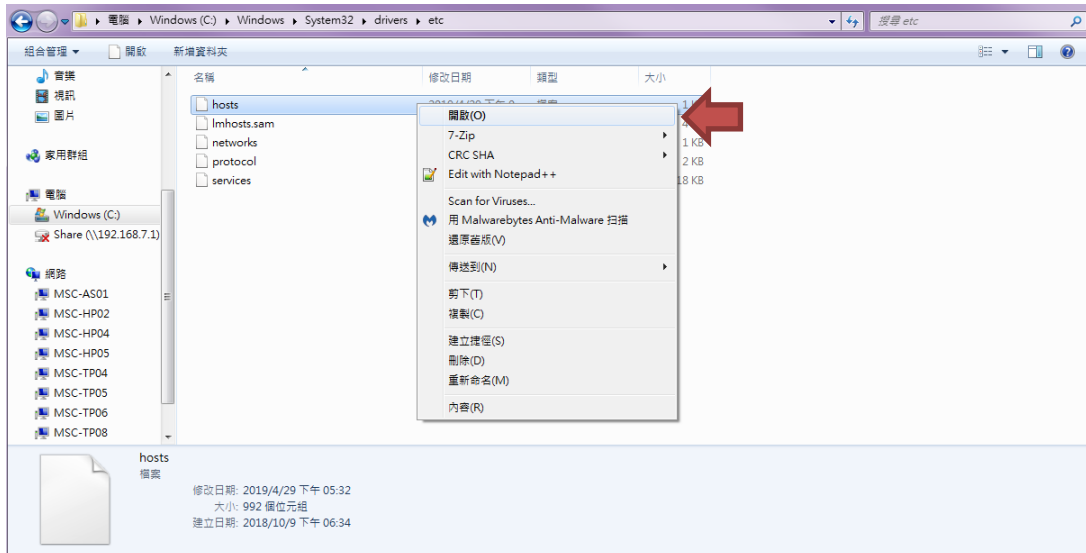

2. 以 WordPad 打開該檔。

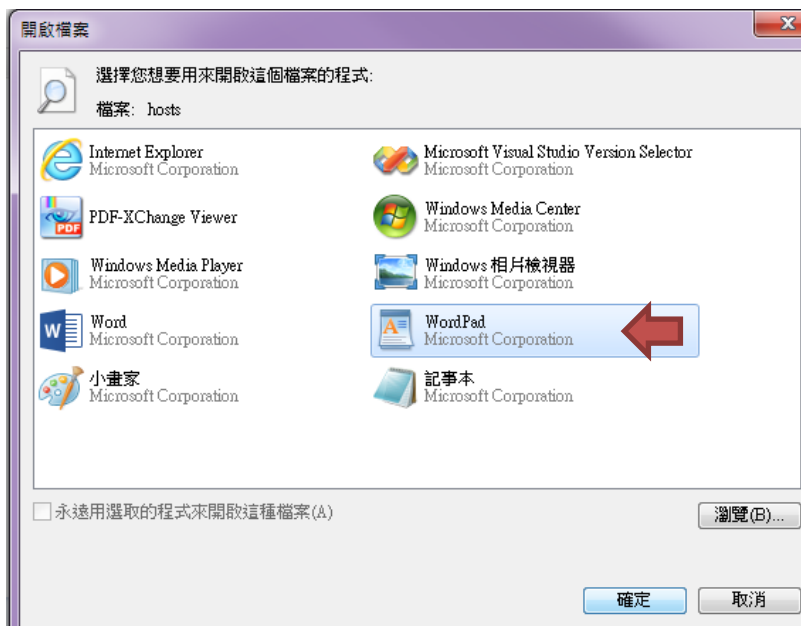

3. 於最下方輸入 **163.15.166.73 KMU-DS** (可直接複製貼上) , 儲存並關閉視窗。

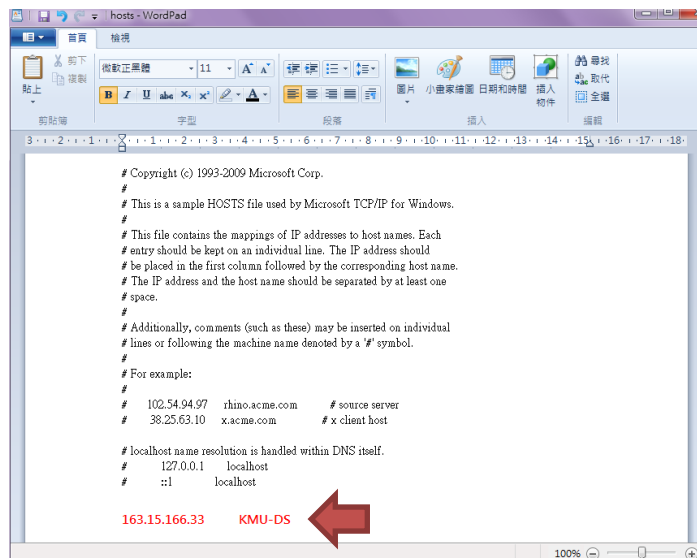


4. 若無法儲存，請先將 hosts 檔案複製至桌面上，進行編輯與儲存，再貼回原資料

夾。


## DS License Server 連線設定

### 1. 打開 License Administrator


在【開始】->【搜尋程式及檔案】中搜尋 License Administrator

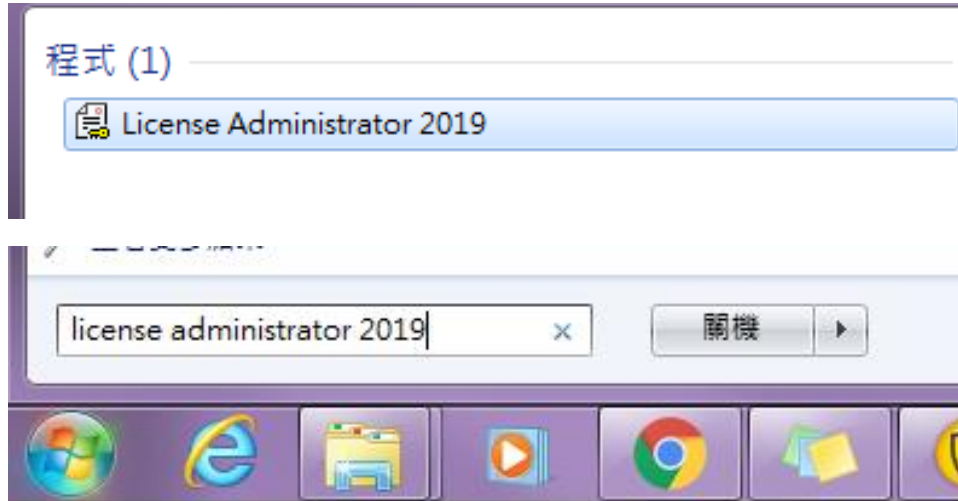

或者至程式集/BIOVIA/Licensing 目錄中找到 License Administrator 2019

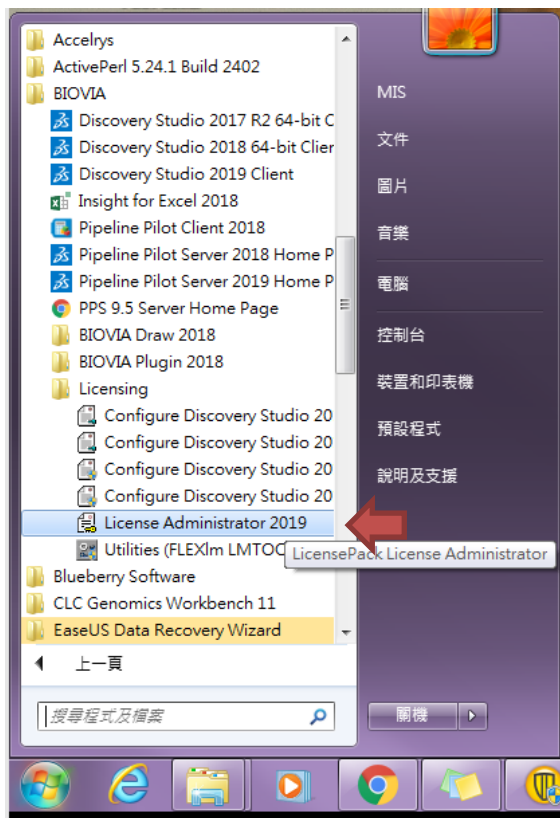


2. 點選滑鼠右鍵，選擇“以系統管理員身分執行”，開啟程式。

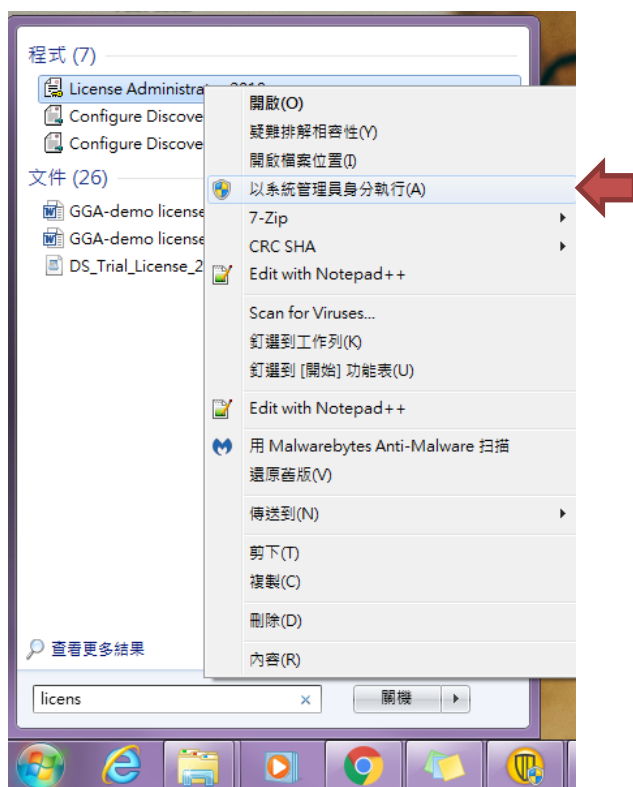


3. License Administrator 設定

點選【License Server】->【Connections】，點選下方中間靠右的 Set 按鈕

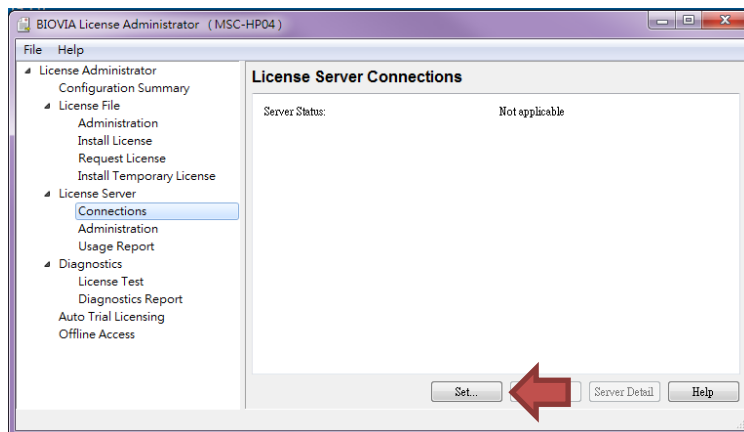




在 Host Name 中輸入: **163.15.166.73**，並點選 OK 完成設定。

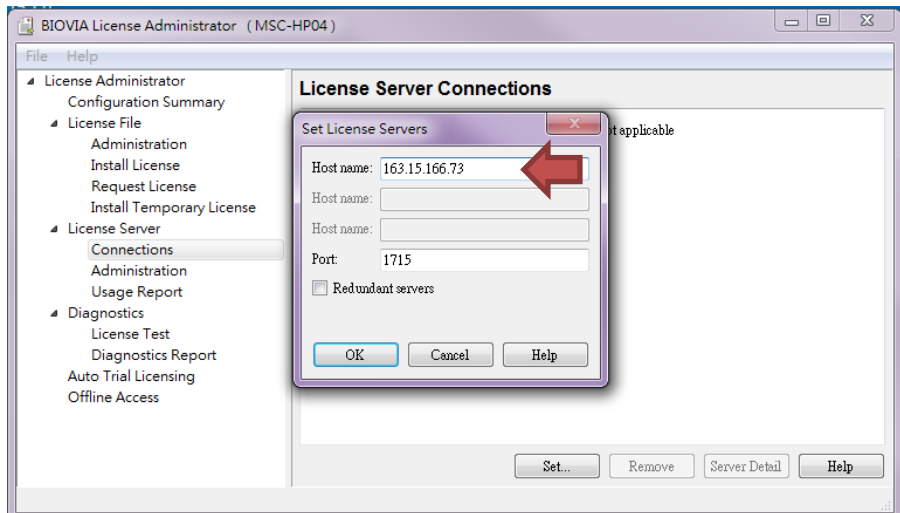


4. 若設定成功，Server Status 會顯示 **Connected**。

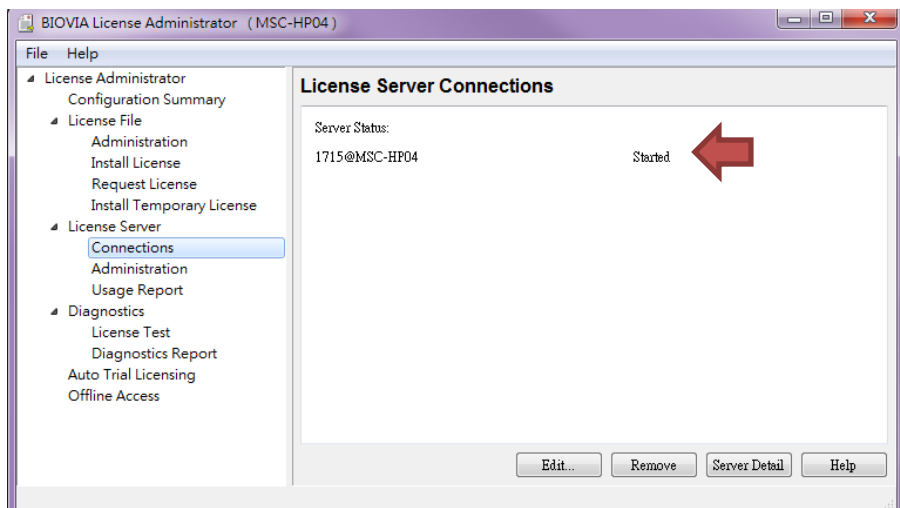


## DS 運算 Server 連線設定

1. 雙點擊右下角 **Enable Additional Features**，跳出視窗後點選 **Yes**。

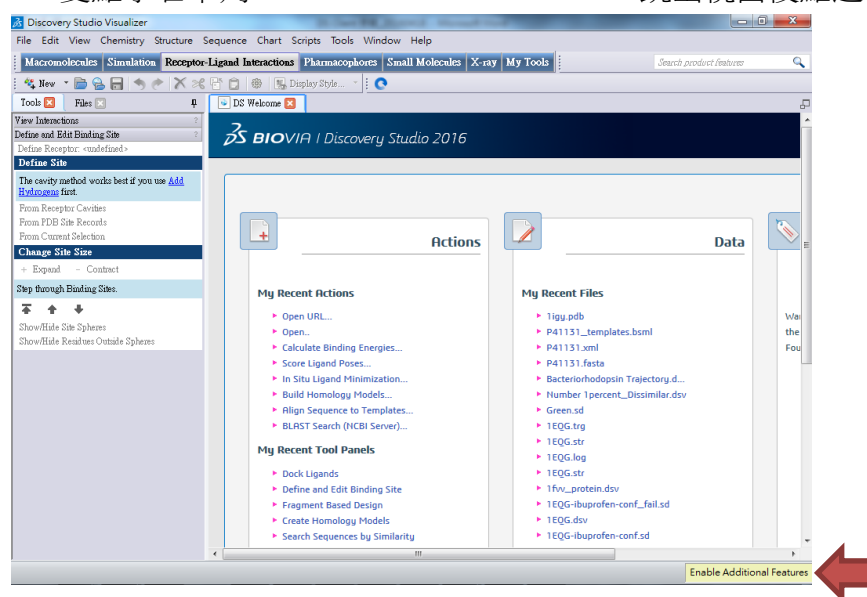

2. Server name 輸入 **163.15.166.73:9943**，並點選 **OK** 完成設定。

※如後續連線有問題，煩請點擊【**Test**】，並提供錯誤訊息給創源以便確認問題。

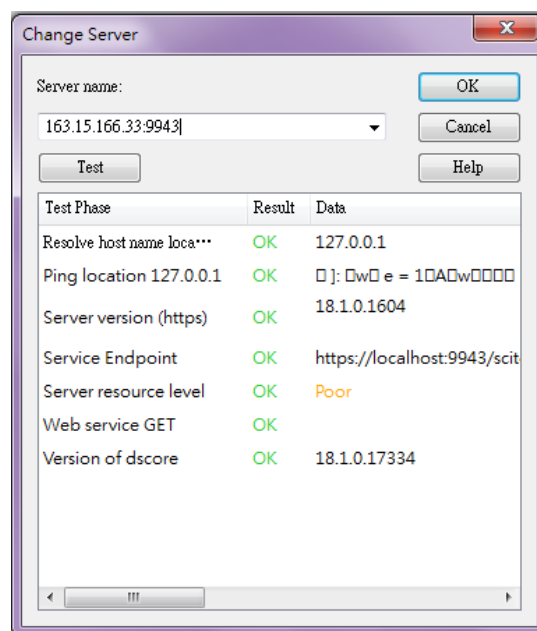

## 防火牆連線設定

## 1. 開啟【控制台】->點選【Windows 防火牆】



## 2. 點選左方【允許程式或功能通過 Windows 防火牆】



## 3. 點選【允許其他程式】

### 允許程式通過 Windows 防火牆通訊


若要新增、變更或移除允許的程式與連接埠，請按一下 [變更設定]。

允許程式通訊的風險為何?

變更設定(N)



## 4. 選取【Discovery Studio】

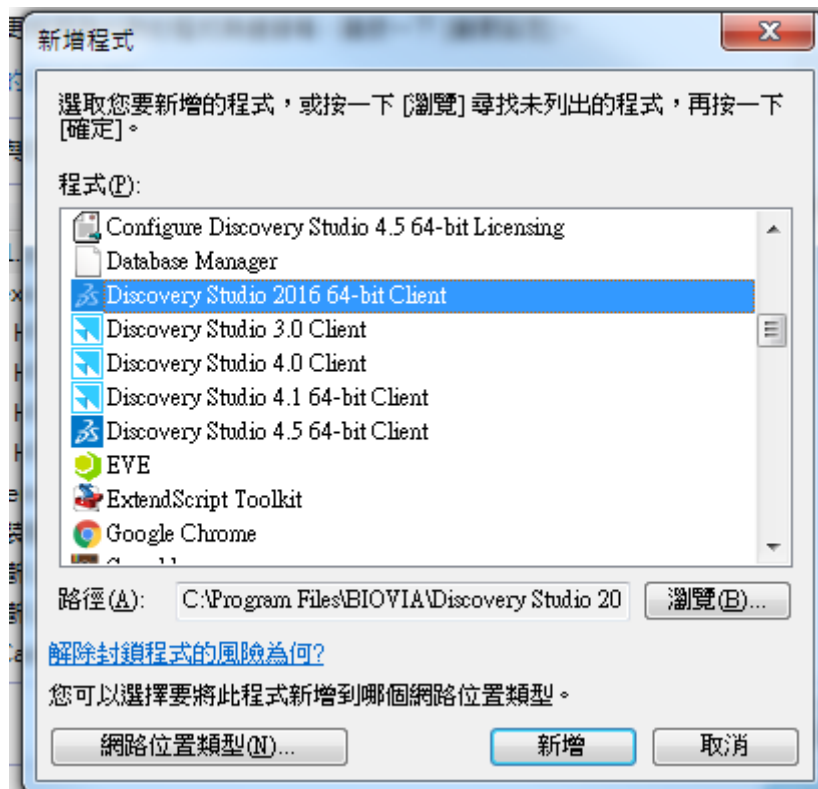

##### 5. 重啟 DS 再設定運算 Server 即可

※如此設定調整過後連線還是有問題，煩請關閉您電腦的防火牆做確認，如是防火牆擋掉，需再請您與網管確認如何調整電腦的防火牆應用程式允許連線設定。

以上操作若有任何問題，歡迎聯繫創源生技

電話: (02)2795-1777 #3666

Email: [Genechen@gga.asia](mailto:Genechen@gga.asia)